


26.01.2025

Brukermanual / User Manual

FORUS LEDSAGERSTYRING /


FORUS ATTENDANT CONTROL

- HP20071066

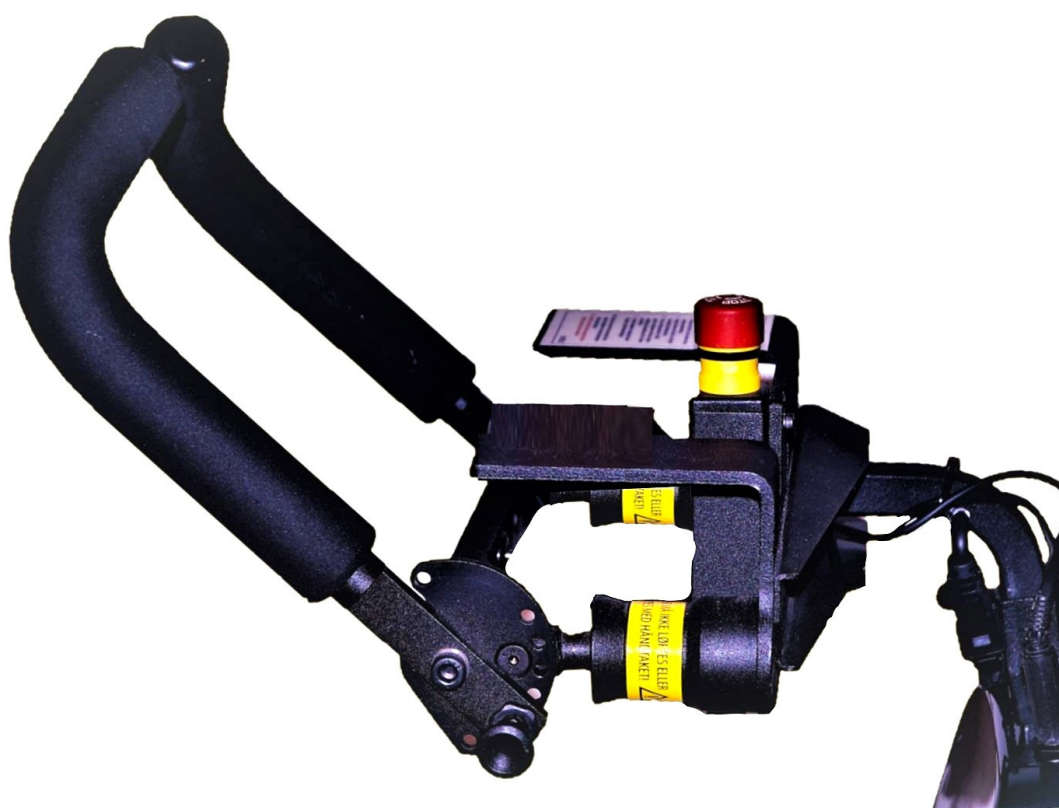

Please note that due to variations or special requirements in the various markets, there may be additional information as appendices or included in the user guide.

For the visually impaired, this and other guides can be downloaded from our website and enlarged on a PC or other electronic aid.

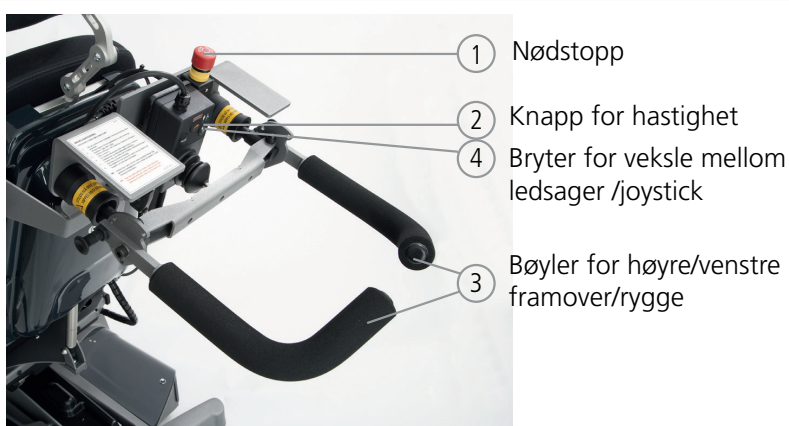

Figur 1. Ledsagerstyring med nødstop, E800



Figur 2. Ledsagerstyring med nødstop, Balder

- Aktiver PÅ/AV knappen, velg mellom ledsager eller joystick kjøring. (pos 4)
- Stolen kjøres fram- og bakover ved å bevege bøylen opp eller ned. Sving ved å bevege bøylen til høyre eller venstre.
- Stolen må stå stille for å veksle mellom ledsagerstyring og brukerstyring.
- Hastighet justeres ved å trykke/vri på knappen i front av ledsagerstyring.

NB! Stolen kan være levert uten styrespake foran. Hastigheten justeres da ved å velge kjøreprogram på ledsagerstyringen.



Viktig

Aldri løft, fest eller belast ledsagerstyring på annen måte enn beskrevet.

Ledsagerstyringen har nødstop plassert på toppen ved betjeningshåndtakene. Denne er merket med rød farge. Press på nødstoppen dersom det skulle oppstå en situasjon der stolen må stoppes øyeblikkelig. Frigi nødstop ved å vri denne med klokken.




ADVARSEL

Juster kjørehåndtakene slik at de peker nedover, for å unngå klemfare ved kjøring innendørs eller i trange passasjer.



Figur 3. Korrekt bruk av ledsagerstyring for å unngå klemfare

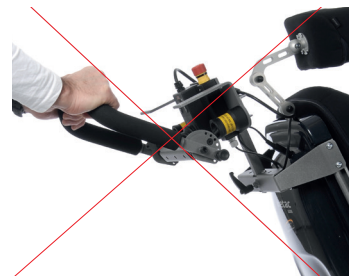


Figur 4. Feil bruk av ledsagerstyring innendørs og i trange passasjer

Demonter/monter avtakbar ledsagerstyring


- Deaktiver stolen med AV/PÅ knappen på joystick
- Fjern plugg fra ledsagerstyring på stolens seterygg (høyre side)
- Løsne håndtaket ved å vri det mot venstre
- Fjern / løft ledsagerstyringen av festet
- For montering av ledsagerstyring gjentas operasjonen i omvendt rekkefølge



Figur 5. Avtakbar ledsagerstyring med nødstop, E800/Balder

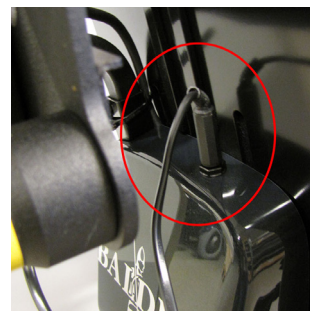

Figur 6. Plugg på stolens rygg, høyre side

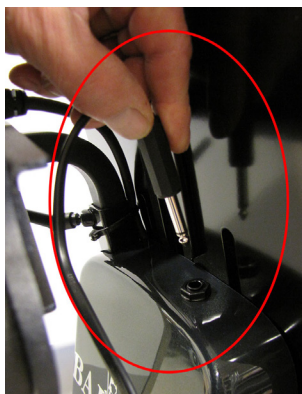

Figur 7. Fjern plugg



Figur 8. Hendel på ledsagerstyring venstre side



Figur 8. Fjern ledsagerstyring

Using the attendant control with emergency stop

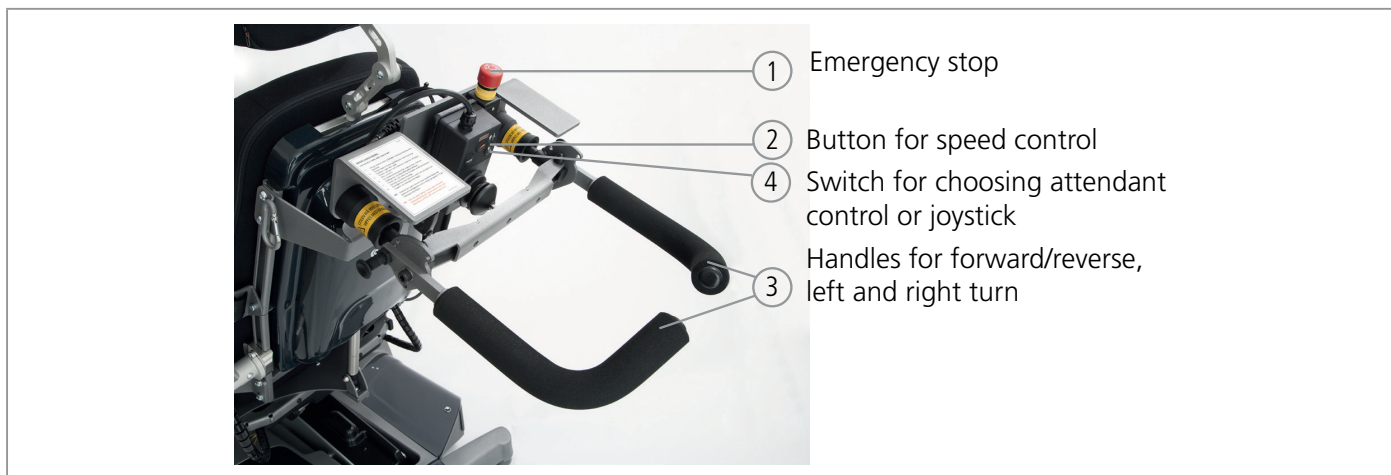


Figure 1. Attendant control with emergency stop, E800

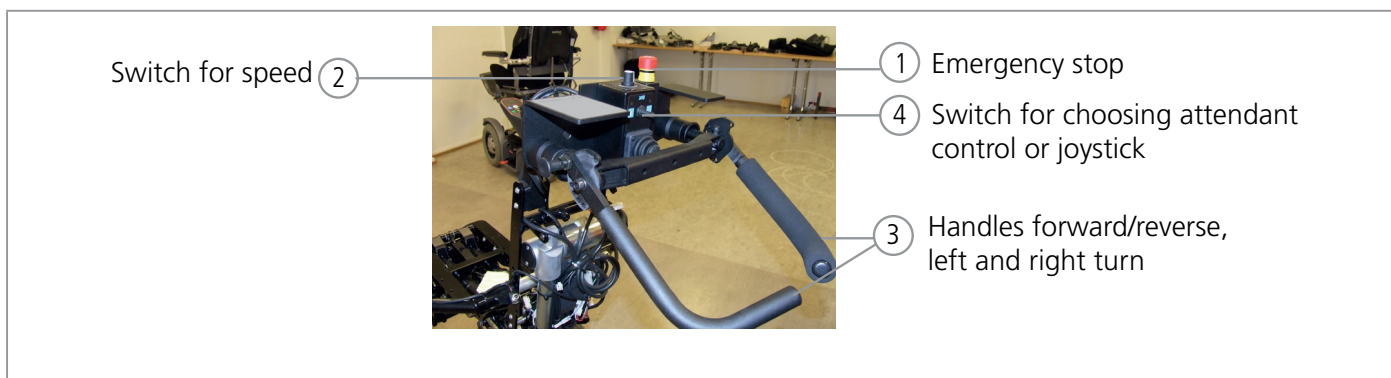


Figure 2. Attendant control with emergency stop, Balder

- Activate the ON / OFF button, choose between attendant control or joystick. (Pos 4)
- The chair runs forward and reverse by moving the handles up or down. Turn by moving the handles to the right or left.
- The chair must be stationary to switch between attendant control and user management.
- Speed is adjusted by pressing / turning the button in front of the attendant control.

Note: The wheelchair may be delivered without joystick in front. Speed is then adjusted by selecting driving program on the assistant control.



Important

Never lift, attach or load the attendant control unit or handle bars other than described.

Emergency button is located on top of the attendant control. The button is marked with a red color. Press the button in the event of a situation in which the chair must be stopped immediately. Release the emergency stop by turning clockwise



WARNING

Adjust the push handles downwards, to avoid the risk of being crushed or trapped by driving indoors or in tight passages.



Figure 3. Correct use of attendant control in order to avoid the risk of getting trapped

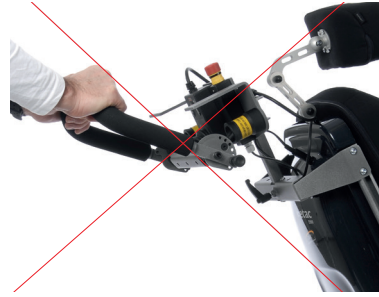


Figure 4. Incorrect use of attendant control indoors and in narrow passages

Dismount / mount removable attendant control

- Deactivate the chair by using the ON/OFF button on the joystick
- Remove the plug from the attendant control the chair's seat back (right hand side)
- Loosen the lever by turning it counterclockwise (left hand side)
- Lift/remove the attendant control
- To mount the attendant control, operation is repeated in reverse order



Figure 5. Removable attendant control w/emergency switch, E800/Balder

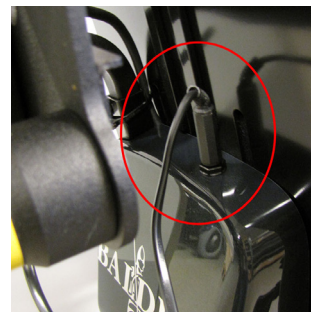


Figure 6. Connector on the right hand side

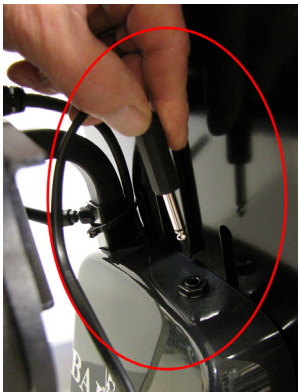


Figure 7. Remove connector



Figure 8. Lever on the left hand side



Figure 8. Remove attendant control

Label serial number

Baldertech AS
Email : info@baldertech.com
Telephone : +47 32 11 11 00
www.baldertech.com

baldertech